

Bedarfsartikel

Dr. Fritz®
Wireless ■ Endoscopes

- Hygiene & Reinigung
- Produkte für den täglichen Bedarf
- Keratelin



We are changing
veterinary endoscopy

Hygiene, Pflege & Reinigung

Reinigung und Desinfektion flexibler Endoskope

Sie arbeiten im Bereich der endoskopischen Verfahren mit hochwertigen und leistungsstarken Produkten der Dr. Fritz GmbH. Passend dazu bieten wir Reinigungs- und Desinfektionsprodukte an, als effektive und ressourcenschonende Lösungen für Ihr individuelles Hygienemanagement.

■ Wasseraufbereitung

Eine der wichtigsten Vorbedingungen für optimale Reinigungsergebnisse ist die Wasseraufbereitung

WA-1466-3 Hochleistungs-Ionenaustaucher

Einzelpatrone, Edelstahl, 20L
Anschluss hydraulisch: 3/4Zoll,
Leistung ca. 1400 L

WA-1466-2 Leitfähigkeitsmessgerät

0-20/ > 20myS, LED Kontrolleuchte



Reinigung und Desinfektion sind ein allgegenwärtiges Thema der täglichen medizinischen Routine. Das Grundziel ist die Minimierung des Infektionsrisikos für Mensch und Tier. Die sorgfältige Reinigung und Desinfektion Ihres Endoskops beeinflusst darüber hinaus wesentlich dessen optimale Funktion und Langlebigkeit. Die Trocknung ist ein wesentlicher Prozess des Hygienekonzepts.

Während der Reinigung wird der Schmutzfilm entfernt. Dieser Schritt wird häufig unterschätzt, ist aber für die Vorbereitung aller Folgeschritte unabdingbar.

Ihr Endoskop legen Sie in eine enzymatische Reinigungslösung (z.B. Dr. Fritz Enzymatischer Reiniger UNIVERSAL für starre Endoskope u. Instrumente, oder FLEX für flexible Endoskope) ein, wobei eine mechanische Vorreinigung mit den speziellen Bürsten (z.B. des Instrumentenkanals) durchzuführen ist. Die Desinfektion erfolgt bei den handelsüblichen Mitteln auf chemischem Wege.

Ihr Endoskop legen Sie hierfür in ein Desinfektionsmittel ein, dass ausdrücklich für Endoskope geeignet ist (z.B. InstruPlus).

Die vorhandene Keimdichte wird reduziert von 1Mio. kbE auf 10 kbE.


Die Sterilisation erfolgt in verschiedenen gängigen Verfahren (z.B. Gas-Sterilisation, Autoklavieren).

Prüfen Sie ob Ihr Endoskop für diese Verfahren geeignet ist.

Üblicherweise sind flexible Endoskope nur für eine Gassterilisation geeignet aber nicht für die Dampfsterilisation.

Starre Endoskope sind mit dem Wort „autoclave“ gekennzeichnet, wenn eine Dampfsterilisation möglich ist.

Dabei wird die vorhandene Keimdichte weiter reduziert von 1Mio. kbE auf 1 kbE (kbE = koloniebildende Einheit).

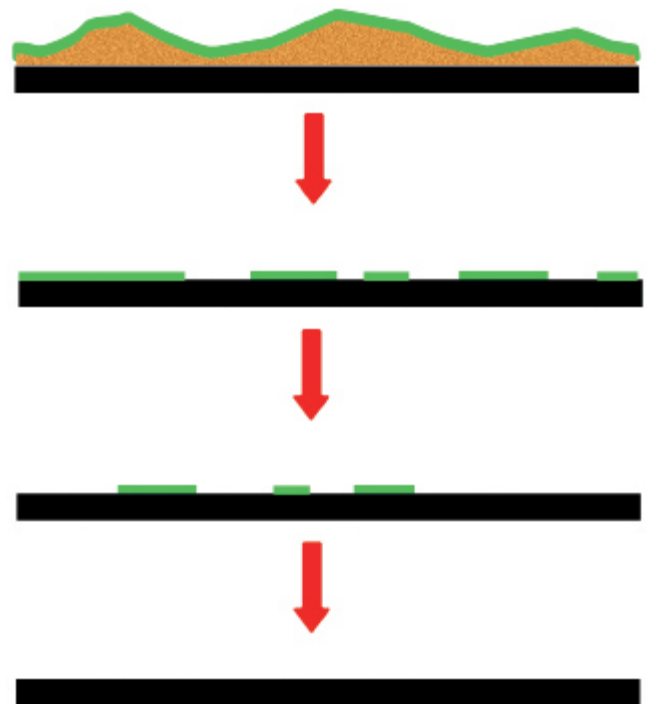

Hygiene, Pflege & Reinigung

Reinigung und Desinfektion flexibler Endoskope

■ Endoscope Washer

Halbautomatische Reinigung von flexiblen Endoskopen und Schläuchen

- Selbstansaugendes Pumpensystem
- Auto Stop Funktion

WA42-205

Endoscope-Washer

Reinigungspumpe für flexible Endoskope u. Schläuche (<4mm) mit Zeitprogramm, passend zu allen gängigen Endoskopen, Größe: 35,5x26,5x10cm, Wandmontage, 2,9kg, 240VAC, 50/60 Hz



Aufbereitungsplatz



Reinigungsadapter für Endoskope anderer Hersteller *(Beispiel)

Wandmontage in Verbindung mit der Desinfektionswanne

Wannen siehe Seite 181

Reinigungsmittel siehe Seite 183

Hygiene, Pflege & Reinigung

Reinigung und Desinfektion flexibler Endoskope

■ Endoscope Dryer

Sicheres Trocknungssystem für flexible Endoskope und dünnlumige Schläuche

- Auto Stop Funktion
- Auch für Endoskope anderer Hersteller geeignet*

WA41-104 **Endoscope-Dryer**, Trocknungspumpe mit Zeitprogramm, für flexible Endoskope u. Schläuche (<4mm), einfacher Filterwechsel, passend zu allen gängigen Endoskopen, Größe: 35,5x26,5x10cm, Wandmontage, 3,7kg, 230VAC, 50/60 Hz

AR-10-922 **Ersatz-Sterilfilter für CO₂ und Druckluft**
Einmalartikel, γ-steril, Pckg. á 50 St.
für Schläuche ID: 4-6 mm, bds.




Schrankmontage



Trocknung hängend

Lagerplatz Wandmontage

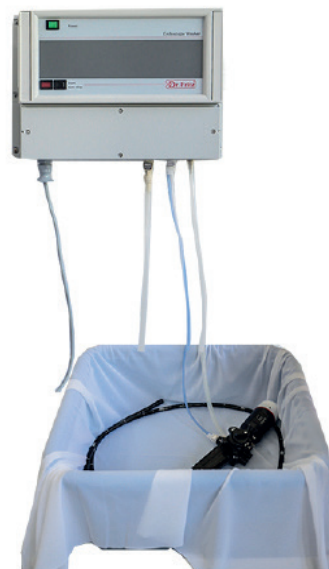

Trocknung liegend

* wenn Original Reinigungsadapter vorliegen.

Hygiene, Pflege & Reinigung

Reinigungsempfehlung - Vorreinigung -

■ Für starre & flexible Endoskope / Instrumente & Kunststoffmaterialien

DE-10-702 Dr. Fritz enzymatischer Reiniger FLEX,
1,5%, 1 L, 7 Enzyme, 0,5%,
speziell für flexible Endoskope



DE-10-300 „IP“ Desinfektionslösung, für
flexible und starre Endoskope. Manuelle und
maschinelle Aufbereitung, 1-3%ige
Lösung, 5 Liter



■ Die einfache Alternative für die Reinigung flexibler Endoskope



stapelbar



- ✓ Deckel schließen und fertig zum Transport zur Hauptreinigung.
- ✓ Schnelle und unkomplizierte Vorreinigung nach der letzten Untersuchung
- ✓ Auch für Reinigungsmaschinen einsetzbar
- ✓ Für alle Endoskoptypen
- ✓ Als Schublade integrierbar
- ✓ Mit Lüftungsöffnung

DE-17-44S Wanne für Reinigung, Transport und
Lagerung von flexiblen Endoskopen,
50x44x16 cm,

bestehend aus:
Grundwanne (DE-17-44)
Deckel, transparent (DE-17-41)

Hygiene, Reinigung & Pflege

■ Desinfektionswannen

Für kleine und große Instrumente

DE-10-426

Desinfektionswanne

lange Version, 72,5x20x14 cm,
Kunststoff blau mit Deckel und Siebeinsatz



DE-10-425

Desinfektionswanne


kurz, 42x16x9,5 cm,
Kunststoff weiß, mit Deckel und
Siebeinsatz



■ Zubehör


DE-5-17

Reinigungsbürste, klein, 17 cm, für Rohre
ID: 2-4 mm, autoklavierbar, 1 St.

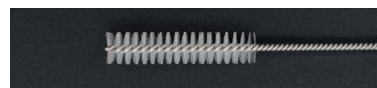

DE-6-21

Reinigungsbürste, klein, 20 cm, für Rohre
ID: 4 - 7 mm, 1 St.

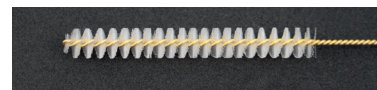

DE-9-25

Reinigungsbürste, 20 cm, für Rohre
ID: 7-10 mm, 1 St.



DE-3-456-E

Reinigungsbürste, 50 cm, für Rohre
ID: 2,5 - 5 mm, autoklavierbar, 1 St.



DE-6-102

Reinigungsbürste, flexibel, 70 cm, für
Rohre und Schläuche ID: 5-6 mm, 1 St.



Hygiene, Pflege & Reinigung

Reinigungs - und Desinfektionsmittel

Für starre und flexible Endoskope, Instrumente und Kunststoffmaterialien

Manuelle und maschinelle Reinigung

DE-10-702 Dr. Fritz enzymatischer Reiniger FLEX,
1,5%, 1 L, 7 Enzyme, 0,5%,
speziell für flexible Endoskope



DE-10-300 „IP“ Desinfektionslösung, für
flexible und starre Endoskope. Manuelle und
maschinelle Aufbereitung, 1-3%ige
Lösung, 5 Liter



RH99-47 Silikonöl, 15 ml
speziell für flexible Endoskope

Sonstiges

WA-1302-25
Spez. Pulver-Reiniger alkalisch,
Neo-MA, 1kg Dose,
für Instrumenten-Spülmaschinen



WA-1302-26 Spez.Klar-Spüler
für Instrumente, Endoskope und
Instrumenten-Spülmaschinen,
1 Liter Flasche



DE-10-65
Polierpaste
für Endoskope, 5g Tube

E-22-71
Antibeschlagmittel
für Endoskope
und Spiegelflächen, 50 ml



Produkte für den täglichen Bedarf

X-5-15-10 Silikon Ersatzschlauch
ID:5 mm, W:1,5 mm, 1 m, naturfarben

X-3-2-7 Silikon Ersatzschlauch
3x2 mm, 1 m, naturfarben

X-6-30-12 Silikon Ersatzschlauch, 6x3 mm, 1 m,
natur, Absaugschlauch

X-7-20-10 Silikon Ersatzschlauch, 6x2 mm, 1 m,
naturfarben, großes Lumen



X-180-26 Silikonschlauch
ID:5 mm, 180 cm; LL(m), bds.

X-300-26 Silikonschlauch
ID:5 mm, 3 m; LL(m), bds.



LLW-1220 Luer-Lock-Anschluss LL(w)
2 mm, für Schlauch bis ID: 1-1,5 mm



LLW-1251 Luer-Lock-Anschluss LL(w), 6 mm
für Schlauch bis ID:
3-5 mm



LLM-1250 Ersatz-Anschluss LL(m)
6 mm, für Schlauch bis ID: 3-5 mm



LLW-1258 Luer-Lock-Anschluss LL(w), 10 mm
für Schlauch bis ID:
6-9 mm



LLM-1258 Luer-Lock-Anschluss LL(m), 10 mm,
für Schlauch bis ID: 6-9 mm



LLW-1263 Luer-Spritzenaufsatz
10 St.



LL-1270 Drei-Wege-T-Stück,
2xLL(w), 1xLL(m) gereinigt, unsteril,
Pckg. mit 10 Stück, Einmalartikel
-nicht autoklavierbar-



LL-1271H Ein-Wege-Hahn
Kunststoff, disposable
unsteril, Pckg. mit 10 Stück



LL-1273H Drei-Wege-Hahn,
Kunststoff, disposable
unsteril, Pckg. mit 10 Stück



AR-10-9 Ersatz-Einstichnadel
für Sterilflaschen
und Beutel, ID:4 mm

AR-10-948 Infusionsschlauch
mit Metalleinstichnadel,
Stopper, Luer Lock(m), Silikon,
6x2 mm, 3 m, großer Querschnitt,
autoklavierbar, komplett



AR-10-922 Sterilfilter für CO₂ und Druckluft
Einmalartikel, y-steril, Pckg. à 50
St. für Schläuche ID: 4-6 mm, bds.

Produkte für den täglichen Bedarf


F11-69**Spezial-Katheter**

4 Fr., 1,1 mm, 69 cm,

Ende gebogen, m. Olivenspitze

***Mindestabnahme 5 Stück


***Sterilware: Umtausch ausgeschlossen

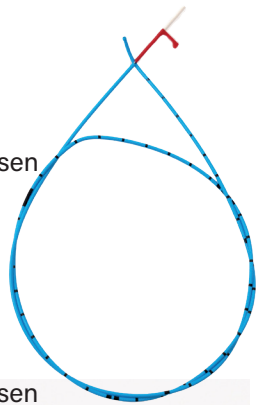**F12-69****Spezial-Katheter** 5 Fr., 1,6 mm, 69 cm,

Ende gebogen, m. Olivenspitze

Mindestabnahme: 5 Stück

***Sterilware: Umtausch ausgeschlossen

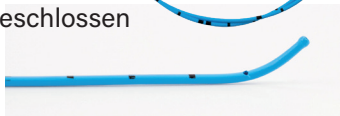**F20-219****Ersatz-Katheter**

für die Bronchoskopie

Teflon, 10 m, D:2 mm, autoklavierbar

F20-220**Katheter**

für die Pferdebronchoskopie,

Teflon, 2 mm, 235 cm,

wechselbar LL(w)


autoklavierbar,

sehr gute Gleitfähigkeit

**F16-50****Spezial-Katheter 1,6 mm**

50 cm, LL(w), verformbar,

Ende gerade, y-steril

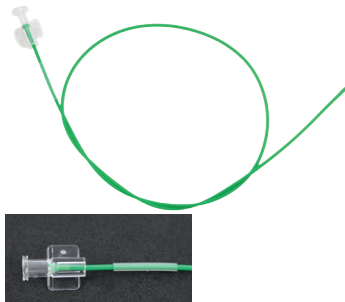**981-VK-S****Silikonhülsen**, schwarz, 20 St. für

Ohraufsatz 981-VK-13/17S

autoklavierbar

**231-211****Dichtkappen**

für Trokarhülsen

Größe 5,5 mm, Pckg. a 10 St.

**230-211****Dichtkappe**rot, für Trokarhülsen/ Redu-
zierungen, Größe 10/11/12 mm,

Pckg. a 10 St.

**234-211**

Produkte für den täglichen Bedarf

▪ Achtung: Einmalprodukte sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Kameraüberzüge

DE-10-25 Kameraüberzüge, Einmal, steril, 1 St.
Polyethylen 13x250 cm
Mindestmenge 25 Stück (1 Karton)



Koagulations- und Schneidezange

BP-05-321 Bipolar-Faß/Schneide-Zange, (Einmal),
5,6 mm, NL: 32 cm, Anschluss: EU-Vierkant

BP-10-321 Bipolar-Faß/Schneide-Zange, (Einmal),
10 mm, NL: 32 cm, Anschluss: EU-Vierkant



Einmal-Biopsiezange flexibel

B23-180E Flex. Einmal-Biopsiezange, 2,3 mm, 180 cm

B23-230E Flex. Einmal-Biopsiezange, 2,3 mm, 230 cm
Löffel oval, y-steril, Pckg a 10 St



Einmal-Trokare

TR-59-54 Einmal-Trokar, ID: 5 mm, NL: 6 cm, mit
Dorn LL(w), zur Insufflation, Karton à 25 St.

TR-60-121 Einmal-Trokar, ID: 12mm, NL: 6cm, mit
Dorn u.Reduzierung 12-8/-5 mm, LL(w)
LL(w) zur Insufflation, Karton à 25 St.



Reinigungsbürsten

F28-280E Reinigungsbürste, flex. 230 cm, Einmalart.
f. Kanäle 1,8-2,8 mm, y-steril, 10 St/Pckg.

F20-181E Reinigungsbürste, flex.180 cm, Einmalart.
f. Kanäle 1,1-2,0 mm, y-steril, 10 St/Pckg.



H20-001E

Halogenspiegellampe, 8V/20W
Ersatzlampe für Lichtquelle H20-001 (o.Abb.)

H150-5-E

Halogenspiegellampe, Xenophot 15V/150W
Ersatzlampe für Lichtquelle 981-VK-100
und H150-5-2; H150-5-31



LO-40-04 Sicherheits-Toggel n. Janowit
für endosk. Labmag. Fixation, 90 cm Doppelfaden.
5 St. ***Toggel extra lang***



Keratelin® Produkte

■ **Keratelin®** Produkte zur Behandlung von Zitzenerkrankungen

THELASEL Fadenstift Die natürliche Lösung


Z-99025-TH **Thelasel Fadenstift**
3 mm, Pg. mit 24 Stück, steril



Bruchsicher und stabil.

**Die neueste Generation für die natürliche
Behandlung von
Zitzenerkrankungen.**

KERATELIN "P2-Cath" Permanent-Katheter

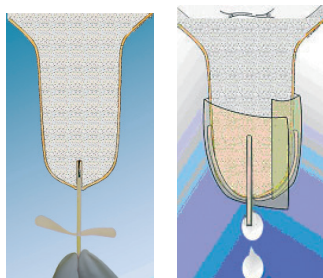


Z-99027 **KERATELIN "P2-Cath"** n. Schlederer, 8 St.
AD: 2,8 mm, LL(w), einzeln verpackt, steril

Die moderne Lösung für perforierende
Zitzen-verletzungen. Keine Langzeit-
schäden durch ständigen Milchabfluß,
kein Druckaufbau in der Zitzen-Zisterne.

KERATELIN - Milchablasskanüle

- die schnellste Ablasskanüle auf dem Markt
- großlumig und doch fein

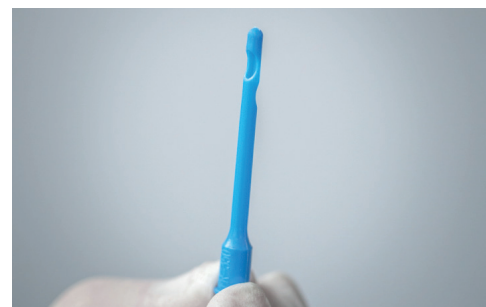

Steril und professionell, sofort einsetzbar.

Z-99055 **KERATELIN-Milchablass-Kanülen,**
100 Stück einzeln verpackt, y-steril,
im Beutel